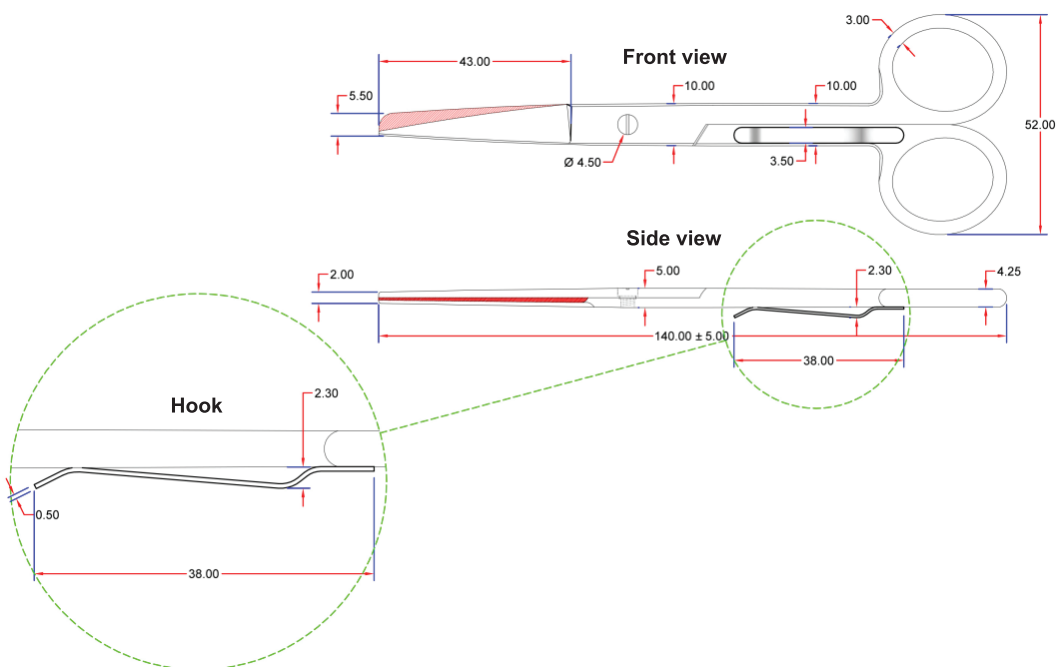
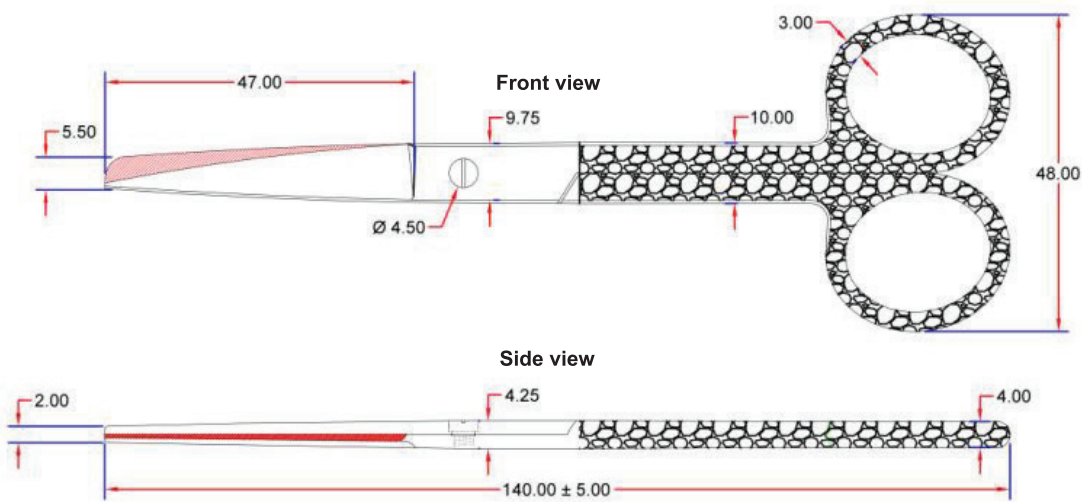




TIJERAS PARA MATERIAL MÉDICO

Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.

Dispositivos

Tijeras para material médico (No estériles, Acero inoxidable).

Especificación del Producto:

El producto está fabricado en acero inoxidable de alta calidad específico para la producción de instrumentos médicos, según las normas ISO y ASTM.

Limpieza previa

Elimine los depósitos macroscópicos utilizando una esponja de laparotomía y agua esterilizada durante el procedimiento.

Limpieza manual

Para minimizar el riesgo del personal que realiza la limpieza manual, deben evitarse en todo momento las salpicaduras y la creación de aerosoles. El personal que lleve a cabo la limpieza manual debe llevar EPP en todo momento.

Los dispositivos deben ser:

- 1) Limpiados utilizando un paño que no suelte pelusa, impregnado con la solución detergente adecuada, seguido de un paño limpio, húmedo y que no suelte pelusa; y luego
- 2) Secados con otro paño limpio que no suelte pelusa. Se pueden utilizar toallitas impregnadas de alcohol tras un proceso de limpieza manual.

Detergentes: Utilice detergentes específicos: no utilice lavavajillas común.

Desinfección

Los instrumentos de papel/recubiertos de polvo GIMA no se pueden esterilizar en autoclave, pero se pueden limpiar/desinfectar con desinfectantes como Endo Star (desinfectante de instrumentos de alto nivel) o cualquier otra solución desinfectante/esterilizante superior.

Manejo en el punto de uso

Solo pueden ser utilizados para el propósito para el que han sido diseñados, únicamente por personal adecuadamente cualificado.

Almacenamiento & mantenimiento

Los productos deben almacenarse lejos de la luz solar directa y del agua, en un ambiente seguro, seco y fresco.

Advertencia

No utilice el instrumento oxidado. Lávese las manos con jabón antibacterial o utilice un desinfectante de manos aprobado antes de usarlo.
Solo para uso profesional - desinfectar antes de usar.

Conclusión

Estos Dispositivos Médicos se clasifican como clase I según el Reglamento de Dispositivos Médicos (MDR) 2017/745.

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA

Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses.

	IT Codice prodotto GB Product code FR Code produit DE Erzeugniscode ES Código producto PT Código produto		IT Fabbricante GB Manufacturer FR Fabricant ES Fabricante DE Hersteller PT Fabricante		IT Non sterile GB Non-sterile FR Pas stérile ES No estéril PT Não estéril DE Nicht steril		IT Dispositivo medico GB Medical Device FR Dispositif médical DE Medizinprodukt ES Producto sanitario PT Dispositivo médico
	IT Leggere le istruzioni per l'uso GB Consult instructions for use FR Consulter les instructions d'utilisation ES Consultar las instrucciones de uso PT Consulte as instruções de uso DE Gebrauchsanweisung beachten		IT Data di fabbricazione GB Date of manufacture FR Date de fabrication ES Fecha de fabricación PT Data de fabrico DE Herstellungsdatum		IT Numero di lotto GB Lot number FR Numéro de lot ES Número de lote PT Número de lote DE Chargennummer		IT Conservare in luogo fresco ed asciutto GB Keep in a cool, dry place FR À conserver dans un endroit frais et sec ES Conservar en un lugar fresco y seco PT Armazenar em local fresco e seco DE An einem kühlen und trockenen Ort lagern
	IT Dispositivo medico conforme al regolamento (UE) 2017/745 GB Medical Device compliant with Regulation (EU) 2017/745 PT Dispositivo médico em conformidade com a regulamento (UE) 2017/745 FR Dispositif médical conforme au règlement (UE) 2017/745 DE Medizinprodukt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/745 ES Producto sanitario conforme con el reglamento (UE) 2017/745				IT - Rappresentante autorizzato nel Regno Unito GB - Authorized Representative in the UK FR - Représentant autorisé au Royaume-Uni ES - Representante autorizado en el Reino Unido PT - Representante autorizado no Reino Unido DE - Autorisierter Vertreter im Vereinigten Königreich		IT Conservare al riparo dalla luce solare GB Keep away from sunlight FR À conserver à l'abri de la lumière du soleil ES Conservar al amparo de la luz solar PT Guardar ao abrigo da luz solar DE Vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern
	IT - Identificatore univoco del dispositivo GB - Unique device identifier PT - Identificador exclusivo do dispositivo FR - Identifiant unique de l'appareil DE - Unique Device Identifier (Eindeutige Kennung des Geräts) ES - Identificador de dispositivo único				IT - Rappresentante autorizzato in Svizzera GB - Authorized Representative in Swiss FR - Représentant autorisé au Suisse ES - Representante autorizado en Suízo PT - Representante autorizado no Suíço DE - Autorisierter Vertreter im Schweizer		IT Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso GB Caution: read instructions (warnings) carefully FR Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements) ES Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente PT Cuidado: leia as instruções (avisos) cuidadosamente DE Achtung: Anweisungen (Warnungen) sorgfältig lesen

 20520 - 20521 - 20522 - 20529
20531 - 20532 - 20533 - 20534